


## Manuel d'utilisation de l'appareil de cryothérapie Booster®

1. Sortir les éléments nécessaires : Appareil Booster®, Tuyau, Adaptateur, Cold pack, Wrap genou.
2. Mettre les Cold pack au congélateur minimum 2 heures.

### Assemblage

1. Ouvrir le Booster® en appuyant sur le bouton blanc à l'arrière de l'appareil et soulever légèrement vers l'avant puis le pousser vers l'arrière.
2. Sortir le couvercle.
3. Installer 4 x Cold pack dans le bac de l'appareil et remplir d'eau la plus froide possible jusqu'à la limite maximum « ICE MAX ». Poser le couvercle et fermer lentement afin que l'air s'échappe. D'avant en arrière, sans forcer, et jusqu'au « clic ».
4. Brancher le tuyau à l'appareil et le wrap au tuyau (attention au sens, petite encoche vers le bas).
5. Brancher l'adaptateur. **(Toujours en dernier).**

L'appareil est prêt à être utilisé. (Voir manuel d'utilisation au verso)

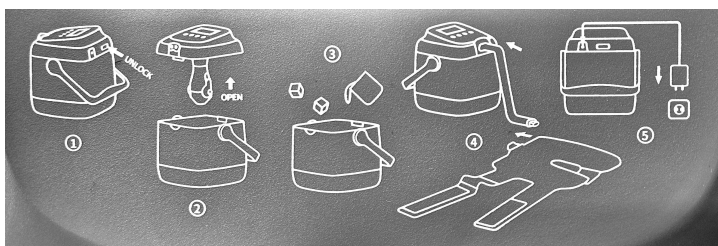

### Retour de l'appareil


1. **Débrancher l'appareil du courant électrique. (Toujours en premier !).**
2. Débrancher le wrap du tuyau et le vider : Installer l'embout de purge sur l'embout du wrap (se tenir au-dessus d'un lavabo) et vider l'eau au maximum. Enlever l'embout de purge.
3. Vider le tuyau : tenir l'embout, du côté débranché, vers le haut (le tuyau est toujours branché à la station de l'autre côté) et appuyer sur les 2 petites parties rondes. Débrancher le Tuyau.
4. Enlever le couvercle, vider le bac et le sécher. Remettre les 4 x Cold pack dans le bac. Remettre le couvercle.
5. Remettre les accessoires dans leurs sachets dans le sac. (Tuyau, embout de purge : poche de gauche, adaptateur, 4 x Cold pack et mode d'emploi : poche de droite).
6. Remettre l'appareil dans son sac et le wrap au-dessus.
7. Mettre le tout dans le carton et nous retourner l'appareil.

## Manuel d'utilisation de l'appareil de cryothérapie Booster®



1. Une fois l'appareil assemblé et branché sur secteur, installez-vous confortablement et placez le wrap autour du genou sans trop serrer (une main doit passer entre le wrap et le membre). **Toujours mettre un tissu de protection entre la peau et le wrap.** (Par exemple un pyjama fin).
2. Choisir le temps de traitement : de 15 min à 120 min.
3. Choisir la pression : de 1 à 5. Modifiable en cours de traitement. (Presser sur off avant)
4. Activer la séance. (On/Off)

L'appareil alterne entre des sessions de compression et de relâchement. Ajustez la pression en fonction de vos besoins. Attention de ne pas trop serrer le wrap afin de laisser la circulation fluide.

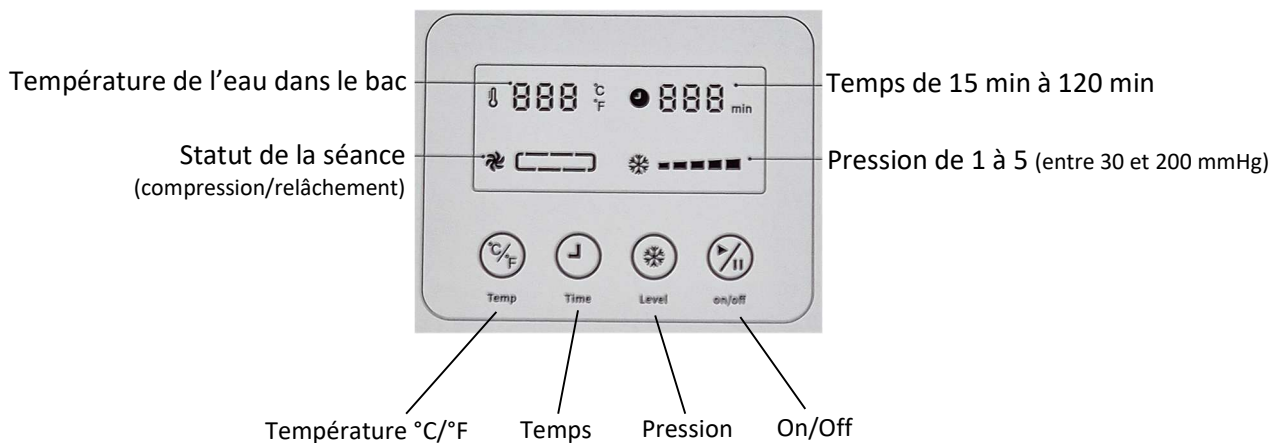

Pour stopper la séance en cours de traitement ou modifier le temps ou la pression, appuyez sur le bouton On/Off.

A la fin de la séance, videz le wrap afin de pouvoir l'ajuster correctement lors de la prochaine séance. (L'eau peut être remise dans le bac). **(Débrancher l'adaptateur avant toute manipulation).**

**Veillez suivre les instructions de votre médecin pour la fréquence des traitements.**